

Zirkonzahn[®]

Human Zirconium Technology



PRETTAU[®] SKIN[®]

LA CULTURA ZIRKONZAHN

FACCETTE PRETTAU® SKIN® NO PREP IN PRETTAU® 4 ANTERIOR® DISPERSIVE®

Dati disponibili:


Foto 2D, scansioni intraorali

Restauro pianificato:

Restauro estetico e funzionale della regione anteriore (13–23) con faccette Prettau® Skin® no prep in zirconia

Flusso di lavoro:

- *Determinazione della tonalità dei denti con la scala colori Zirkonzahn Shade Guide Prettau® Line*
- *Nel software Zirkonzahn.Modifier: realizzazione del set-up e individualizzazione del set di anatomie dentali SERAPHIM selezionato dalla libreria virtuale Heroes Collection*
- *Identificazione dell'asse d'inserzione ottimale per la produzione del modello block-out*
- *Progettazione di un mock-up e fresatura in resina Temp Premium Flexible nella fresatrice M6 Teleskoper Blank Changer*
- *Prova in bocca del mock-up per valutare gli aspetti funzionali, fonetici ed estetici e fornire al paziente una prima visualizzazione del possibile risultato finale*
- *Progettazione di sei faccette Prettau® Skin® e fresaggio nel blocco in zirconia Prettau® 4 Anterior® Dispersive®*
- *Sinterizzazione delle faccette nel forno Zirkonofen Turbo; caratterizzazione con ICE Stains 3D by Enrico Steger e stratificazione minima con Fresco Ceramics*
- *Cementazione dei restauri finali nel cavo orale del paziente e realizzazione di un bite in resina Therapon Transpa per proteggere le faccette*

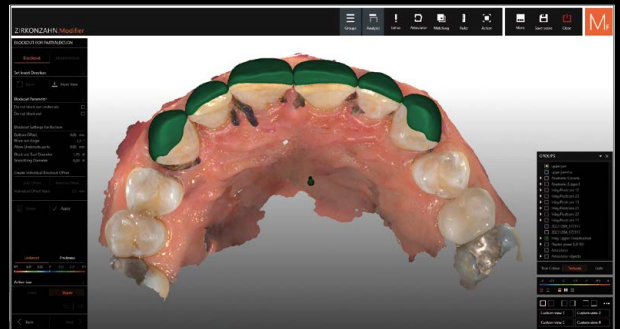

100 % FUNZIONE ED ESTETICA GRAZIE AD UN TRATTAMENTO NON INVASIVO

Dr. med. dent. José Carlos Alva Manríquez – León, Messico

Odt. Alexander Lichtmanegger – Zirkonzahn Education Center Brunico, Alto Adige





PRETTAU® 4 ANTERIOR® DISPERSIVE®

- Zirconia dall'elevata traslucenza con gradiente di colore naturale; il colore viene distribuito in modo uniforme per un effetto di "dispersione"
- Per corone singole, inlay, onlay, faccette e ponti fino a 3 elementi (restauri monolitici o strutture ridotte per la stratificazione con ceramica)
- Particolarmente indicata per il settore anteriore, ma può essere utilizzata anche per restauri posteriori
- Nessuna scheggiatura della ceramica (grazie al design monolitico); nessuna abrasione dell'antagonista
- Caratterizzazione individuale del restauro con Colour Liquid Prettau® 4 Anterior® Aquarell Intensivi, ICE Ceramics, Fresco Ceramics, ICE Stains Prettau® e ICE Stains 3D by Enrico Steger



HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

Zirkonzahn Worldwide – Tel +39 0474 066 680 – info@zirkonzahn.com – www.zirkonzahn.com

NOVITÀ! 1 ORBITA – 4 DIAMETRI (95, 98, 106 E 125 mm)

PER LA LINEA DI FRESATRICI COMFORT M2, LA FRESATRICE M4 WET HEAVY METAL E LA **NUOVA FRESATRICE M6 TELESKOPER BLANK CHANGER**



VIDEO
GAMMA DI
FRESATRICI
COMFORT M2

